



AinA-8000 사용설명서

Personal Combinational Stimulator

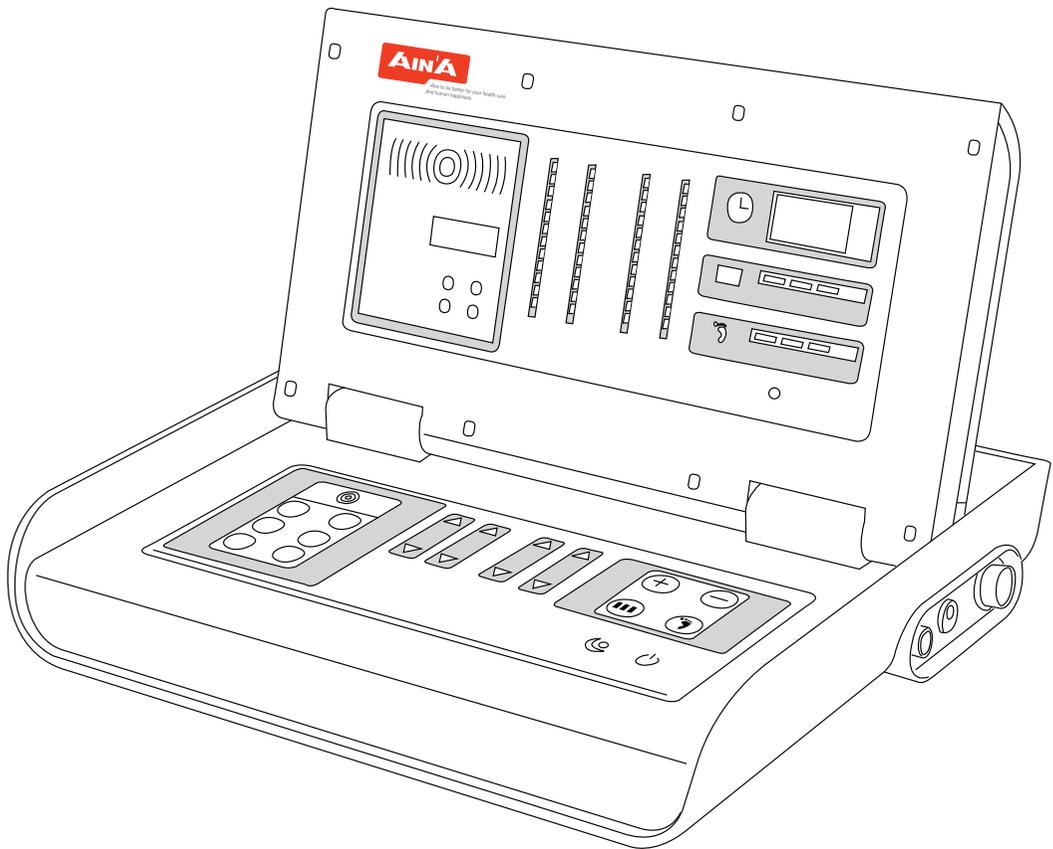

AinA-8000 사용설명서

Personal Combinational Stimulator

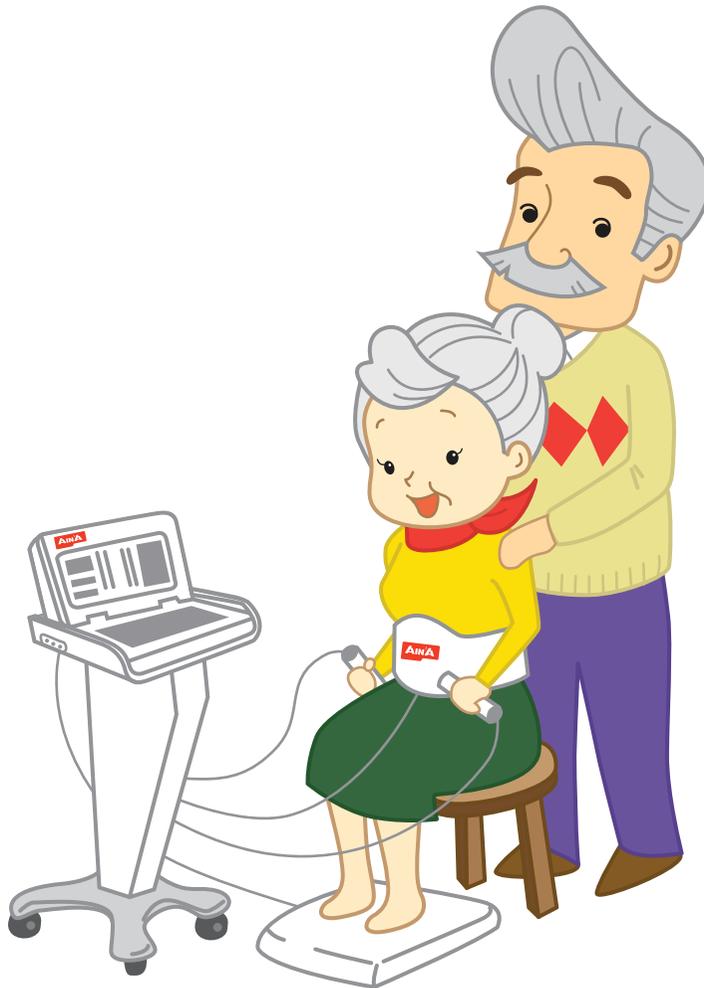

**“본 제품은 대한민국 국가 R&D 활성화 정책의 일환으로
산업통상자원부와 미래창조과학부의 지원을 받아 개발된
첨단 기술제품입니다.”**

기술보호정책

본 제품은 발명특허 3건(제10-1100718호, 제10-1174316호, 제10-1174311호)
실용특허 1건(제20-0456713호), 디자인 특허 7건(제30-0463045호, 제30-0609237호,
제30-0609238호, 30-0609239호, 제30-0609240호, 제30-0609241호, 제30-0609242호) 등
대한민국 특허법 제 94조에 의거 법적으로 보호받고 있으며 무단 도용 시 처벌 받을 수 있습니다.

차 례

안전을 위한 주의사항

I. 제품 소개

1. 제품구성
 2. 각 부위 명칭
-

II. 제품설치

1. 손봉설치
 2. 원형패드 설치
 3. 온열벨트&복부패드 설치
 4. 발판 설치
 5. 전원 케이블 설치
 6. 접지
-

III. 사용방법

1. 저주파 사용방법
 2. 온열 사용방법
 3. LED 사용방법
-

IV. 관리 및 주의사항

1. 제품관리 및 보관방법
2. 제품의 성능 및 사양
3. 제품의 A/S
4. 품질보증서

안전을 위한 주의사항

1. 사용전 “안전을 위한 주의사항” 을 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.
2. 여기에 표시된 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용을 포함하고 있으므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
3. 읽으신 후에는 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주시고, 만일 본 제품을 타인에게 대여하거나 양도할 경우에는 반드시 이 사용설명서를 함께 전달하여 주십시오.
4. 본 설명서에는 취급을 잘못된 경우의 위험 정도를 다음의 3가지 등급으로 분류하고 있습니다.

 위험	이 표시는 잘못 취급할 경우 사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험이 예상되는 경우를 나타냅니다.
 경고	이 표시는 잘못 취급할 경우 중대한 인적 상해나 물적 손해를 입을 가능성이 예상되는 경우를 나타냅니다.
 주의	이 표시는 잘못 취급할 경우 사람이 상해를 입거나 물적 손해의 발생이 예상되는 경우를 나타냅니다.

위험

사용금지 :
아래와 같은 의료전기전자기와
절대로 혼용하지 마십시오.
(오작동의 위험이 있습니다)

- ① 페이스메이커(Pace maker)등의 체내 삽입형 의료전기전자기기
- ② 인공심장 등의 기타 생명유지 의료기기
- ③ 심전계 등의 장착형 의료기기 또는 인체내에 전기전자를 이용하는 장기 등을 이식한 경우



※ 본 사용설명서의 내용은 회사 사정에 따라 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

위험

1. 아래 사항에 해당되는 경우에는 반드시 의사와 상담 후 사용하십시오.
 - ① 급성 및 악성·감기 및 고열환자
 - ② 임산부
 - ③ 심장발작의 경험이 있거나 현재 중증의 심장장애가 있는 자
 - ④ 사용부위의 피부에 이상이 있는 자
2. 아래의 신체부위에는 사용하지 마십시오.
 - ① 상처부위
 - ② 심장(심장 가까운 곳)
 - ③ 성형부위
 - ④ 머리 및 얼굴 부위
 - ⑤ 체내에 금속 또는 플라스틱, 실리콘 등을 삽입한 주변
 - ⑥ 화상 및 상처, 염증 등 피부 손상 부위
3. 병원 치료 중이거나 통원치료중인 분은 의사와 상담 후 사용하십시오.
4. 사용 중 발열이나 환부의 홍반증세, 가려움의 증상 시 사용을 중지하고 의사와 상의 하십시오.
5. 민감성 피부 및 알레르기 반응이 있는 경우 의사와 상담 후 사용하십시오.

※ 상기 사항에 해당할 경우 반드시 의사와 상담 후 사용하십시오.

안전을 위한 주의사항



★ 전원관련

1. 정격전압은 220V, 60Hz 입니다.
2. 전원 플러그는 반드시 접지된 전용 콘센트를 사용하십시오.
(고장 및 누전 시 감전의 우려가 있습니다.)
3. 손상된 전원코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
4. 전원 플러그는 접촉 불량이 되지 않도록 정확하게 끼우십시오.
5. 하나의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 꽂아 사용하지 마십시오.
(콘센트의 이상발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.)
6. 전원 코드 부분을無理하게 잡아당겨 빼지 마십시오.
(코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)
7. 전원코드에 흠집을 내거나 파손 및 가공하거나無理하게 굽히거나 당기거나 비틀거나 묶지 마십시오.
(코드나 케이블이 파손되어 발화나 감전의 원인이 됩니다.)
8. 케이블이나 코드는 바르게 펴서 사용하십시오.
9. 전원 플러그는 이물질이 묻지 않도록 항상 청결을 유지하십시오.
(파손되거나 이물질이 묻은 상태에서 사용시 화재 및 감전의 원인이 될 수 있습니다.)
10. 젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전사고의 위험이 있습니다.
11. 전원 코드는 사람이 지나다니는 통로에 놓지 않도록 하십시오.
12. 낙뢰가 발생할 경우에는 전원코드를 뽑아두어야 안전합니다.
13. 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

★ 사용관련

1. 제품을 임의로 분해 또는 수리, 개조하지 마십시오. 감전의 원인이 되거나 이상 작동을 일으켜 위험할 수 있습니다.
(수리가 요구될 때에는 본사 고객센터 1566-9824로 연락하여 주십시오.)

2. 제품에 이상이 발생하였을 경우, 즉시 사용을 중지하시고 구입처나 본사 A/S센터로 문의하시기 바랍니다.
3. 사용은 낮은 강도에서부터 시작하여 서서히 올려 주십시오.
(갑작스럽게 높은 강도로 올려 사용하면 놀랄 위험이 있습니다.)
4. 본인의 체감에 적당한 강도를 설정하여 사용하십시오.
5. 본 사용설명서에 기록되어 있는 사용방법과 목적이외의 용도로는 사용하지 마십시오.
6. 사용 중 신체에 이상이 발견되었을 경우에는 즉시 사용을 중지하시고 의사와 상담하십시오.
7. 제품에 강한 충격을 주거나 던지지 마십시오.
8. 케이블 또는 벨트를 잡고 강하게 돌리거나 당기지 마십시오.
9. 다른 기기와 병용하여 사용하지 마십시오.
10. 목욕탕 등 습기가 많은 장소에는 사용하지 마십시오.
11. 연속적으로 60분을 초과하여 사용하지 마십시오.
12. 제품을 작동시킨 상태에서 외출하거나 다른 장소로 이동하지 마십시오.

★ 유아(어린이)관련

1. 제품 사용 중 어린이가 제품 가까이 접근하지 않도록 하십시오.
(부주의한 조작 시 패드 접촉에 의해 아이가 놀랄 위험이 있습니다.)
2. 아이들이 제품을 가지고 놀지 못하게 하십시오.
(벨트 및 케이블류를 목에 감을 경우 질식의 위험이 따릅니다.)
3. 전원 선을 물어 뜯거나 칼로 끊을 경우 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
4. 아이들이 노는 곳에 제품을 둘 경우 제품이 넘어져 모서리 등으로부터 상처를 입을 수 있습니다.
5. 사용하지 않을 때는 반드시 전원을 OFF시켜주십시오.
(오작동으로 아이가 놀랄 수 있습니다.)
6. 제품 위에서 뛰어 놀 경우 외상 및 제품에 손상의 우려가 있으니 반드시 주의시켜 주십시오.

안전을 위한 주의사항

주의

★ 설치 및 보관 관련

1. 제품 운반 시 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마십시오.(제품 고장의 원인이 됩니다.)
2. 본 제품이 직사광선에 직접 노출되지 않도록 관리해 주십시오.(색상이 변할 수도 있습니다.)
3. 알코올 또는 시너와 같은 가연성 용제를 제품 가까이 두지 마십시오.
또한 제품을 전열기구 및 난로 가까이 설치하지 마십시오.
(제품 변형 및 발화, 화재의 원인이 됩니다.)
4. 제품을 경사진 곳, 흔들리거나 심하게 진동이 발생하는 곳에는 설치하지 마십시오.
(제품은 평평한 곳에 설치하여 사용하십시오.)
5. 고온 다습한 곳에 보관 또는 사용하지 마십시오.
6. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
7. 북부패드는 심하게 굽히거나 충격을 주지 마십시오.
8. 다른 가전 제품의 리모컨을 본 제품 리모컨 수신부위에 위치하여 작동하지 마십시오.
오작동으로 인해 위험할 수 있습니다.

★ 사용관련

1. 사용설명서 이외에 기록되지 않은 사항이 있을 경우 반드시 제품구입처나 본사에 내용을 확인 후
사용하십시오.
2. 사용방법 및 작동방법을 반드시 숙지한 후에 사용하십시오.
3. 뽀족하거나 날카로운 물건 또는 금속성물질을 제품에 접촉시키거나 긁지 마십시오.
4. 강도가 높을 경우 강도를 낮추어 사용하십시오.
5. 기기작동 시 무리한 힘을 가하지 마십시오.(제품 손상의 원인이 됩니다.)
6. 기기 주변에 물이나 음료 등 액체 제품을 놓지 마십시오.
(액체가 쏟아져 기기작동에 악영향을 주거나 감전 또는 쇼크에 의한 화재의 위험이 있습니다.)
7. 제품에 물, 음료 등의 액체가 들어갔을 경우 즉시 전원코드를 뽑고 본사 A/S센터로 연락하여
주십시오.
8. 기기의 고장을 발견하거나 정전이 되었을 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 사용을 중지하십시오.

★ 보관 및 청소

1. 극단적인 고온이나 저온은 피하고 상온의 실내에서 보관하여 주십시오.
2. 물이 튀지 않는 장소에 보관하여 주십시오.
3. 기기 사용 후 다음 사용에 지장이 없도록 깨끗한 상태로 보관하여 주십시오.
4. 장기간 사용하지 않았다가 사용하고자 할 경우 반드시 사용 전에 제품이 정상적으로 안전하게 작동이 되는지를 확인 후 사용하십시오.
5. 물기를 완전히 제거한 부드러운 천으로 잘 닦아서 청소해 주십시오.
6. 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등 약품류로는 닦지 마십시오.
7. 반드시 전원플러그를 완전히 뽑은 후에 청소하십시오.


안전을 위한 주의사항을
꼭 지켜주십시오~



I. 제품 소개

1. 제품 구성


기본품

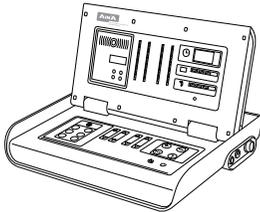

본 체



발 판

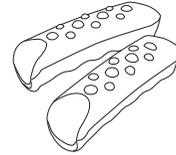


손 봉




복부패드



온열 벨트

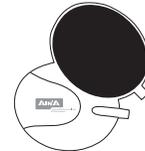


원형 패드

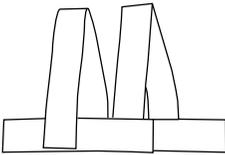


어깨 밴드




원형패드 밴드

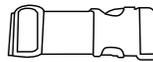


무릎 고정벨트

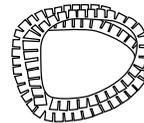


매직 케이블

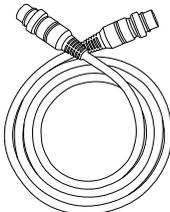

발판 연결선

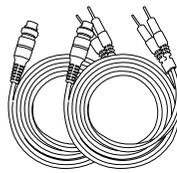


2P 연결선

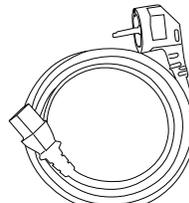


전원 케이블




리모컨

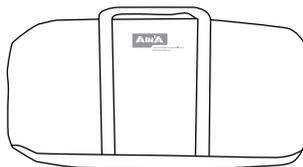

부직포 가방

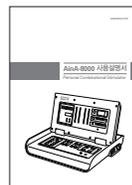


사용설명서

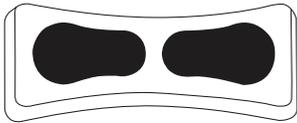

경추패드



척추패드

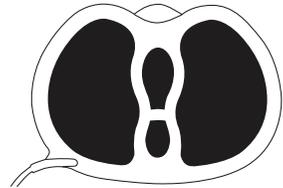


케겔업




사각패드




사각패드 밴드

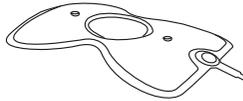

무릎패드

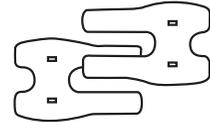


무릎패드 밴드

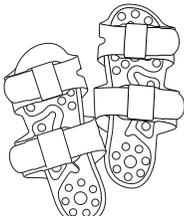


발패드



온열벨트 어댑터

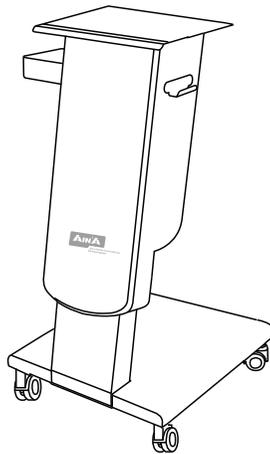

거치대

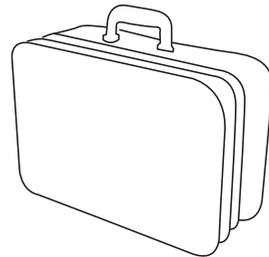

가방

※ 본 사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로
제품의 성능향상을 위해 변경될 수 있습니다.

※ 제품 구입시 제공된 기본품 및 별매품 외에 다른 제품을 사용하지 마십시오.


2. 각 부위 명칭

① 본체

LED 및 저주파
동작 표시등

주파수 표시부

모드 표시부

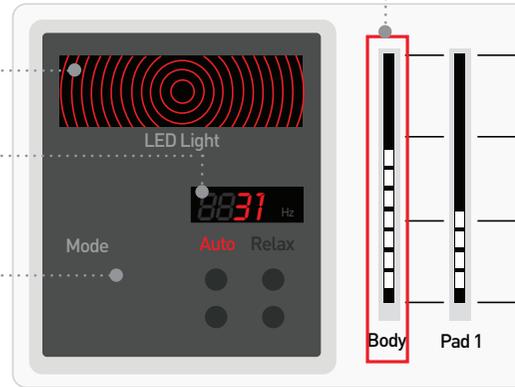


LED LIGHT
버튼

AUTO 선택
버튼

RELAX 선택
버튼

모드 1,2,3,4
선택 버튼

BODY 출력
UP/DOWN
버튼

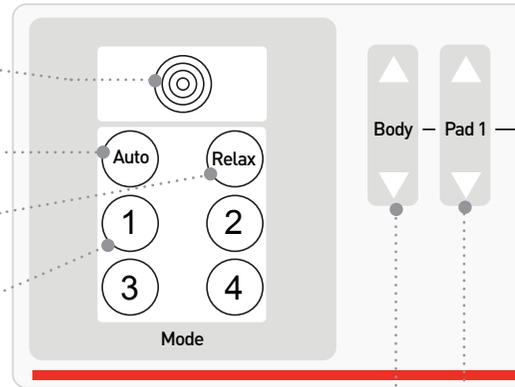




PAD1 출력
UP/DOWN
버튼

FOOT 출력구
기본품-발판
별매품-케겔업, 척추패드


DC 12V 출력구

PAD2 출력구
기본품-손봉, 원형패드
별매품-경추패드, 사각패드

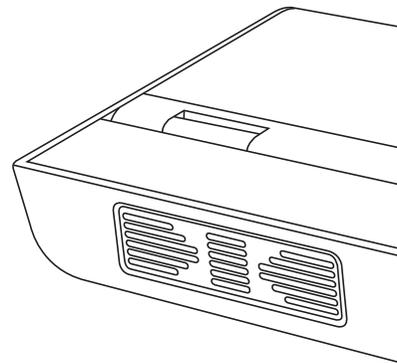


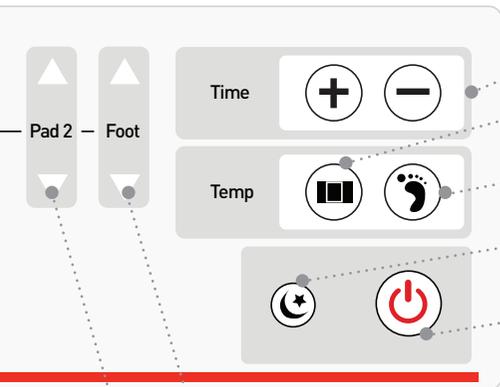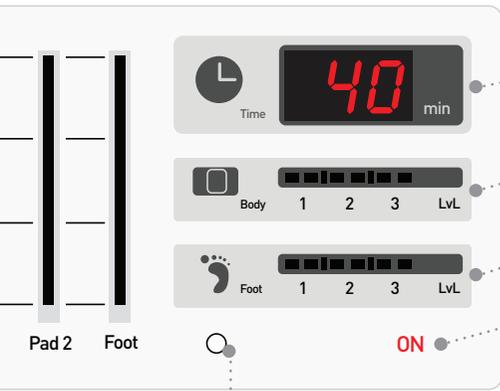

PAD2 출력 UP/DOWN 버튼

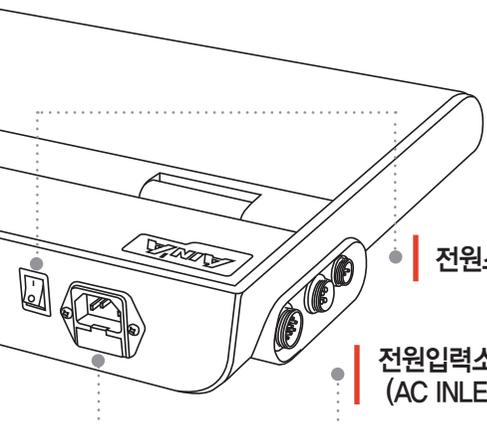

전원스위치
전원입력소켓 (AC INLET)

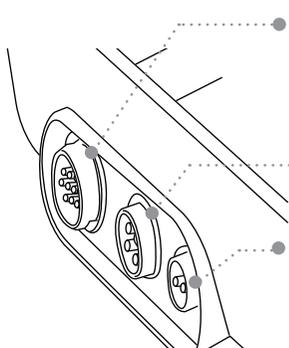

BODY 출력구
기본품-북부패드
온열벨트 출력구
PAD1 출력구
기본품-손봉, 원형패드
별매품-경추패드, 사각패드

- 강도 표시부
- 시간 표시부
- 온열벨트 온도 표시부
- FOOT 온도 표시부
- 전원 표시부
- 리모컨 수신부
- TIME UP/DOWN 버튼
- BODY 온도 조절버튼
- FOOT 온도 조절 버튼
- DARK 버튼
- POWER (ON/OFF) 버튼
- FOOT 출력 UP/DOWN 버튼

② 리모컨

DARK 버튼

DISPLAY의 시간표시부를 제외한 모든 표시등이 꺼진다.

BODY 출력 조절 버튼

BODY 출력을 조절한다.

PAD1 출력 조절 버튼

PAD1 출력을 조절한다.

PAD2 출력 조절 버튼

PAD2 출력을 조절한다.


AUTO 선택버튼

AUTO 모드를 선택한다.

모드 선택 버튼

모드 RELAX 1, 2, 3, 4 를 선택한다.



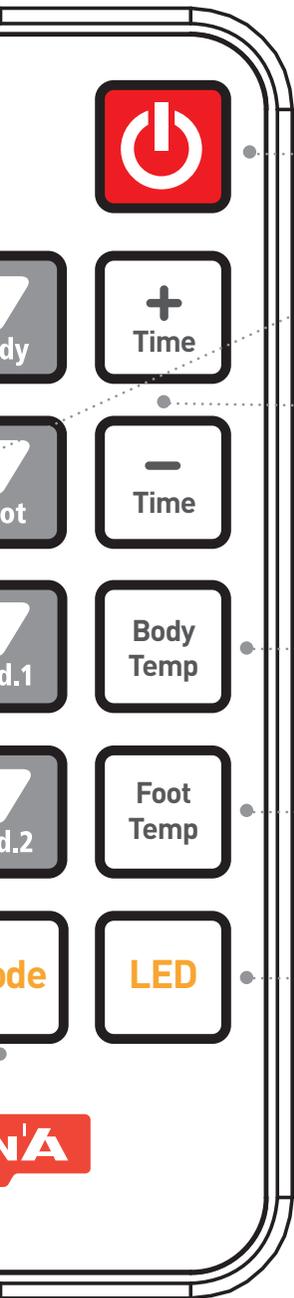

● 기기 전원을 ON/OFF 한다.

파워버튼

● Foot 출력을 조절한다.

**FOOT 출력
조절 버튼**

● 사용시간을 조절한다.

**TIME UP/DOWN
버튼**

● 복부 온도를 조절한다.

**복부온도
조절 버튼**

● 발 온도를 조절한다.


**발 온도
조절 버튼**

● LED LIGHT 를 ON/OFF한다.

LED LIGHT 버튼

II. 제품의 설치

기본품

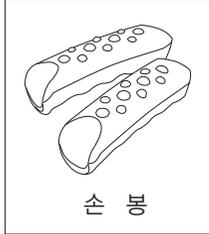

손 봉



원형 패드



2P 연결선

별매품




경추패드




사각패드

1. 손봉 설치

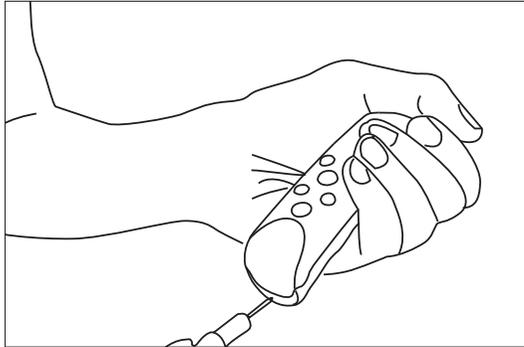


손봉과 2P연결선을 결합합니다.

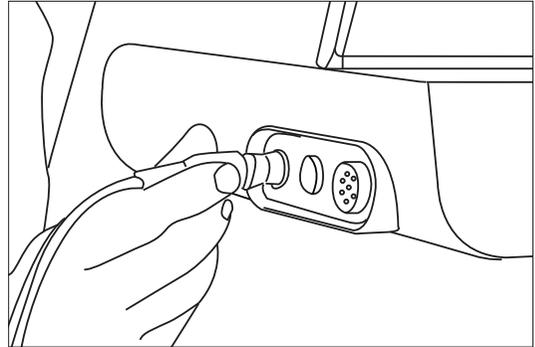


연결된 2P연결선을 본체 오른쪽 세 번째 커넥터에 연결합니다.
(별매품 : 경추패드, 사각패드를 동일하게 연결)

2. 원형패드 설치


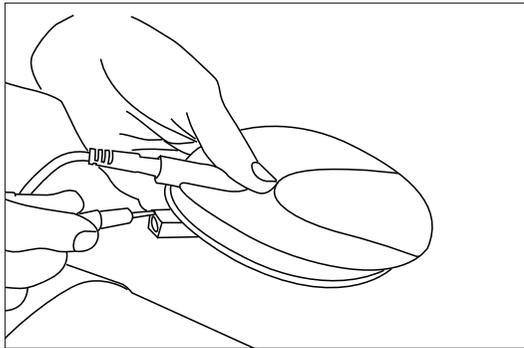


원형패드와 2P연결선을 결합합니다.

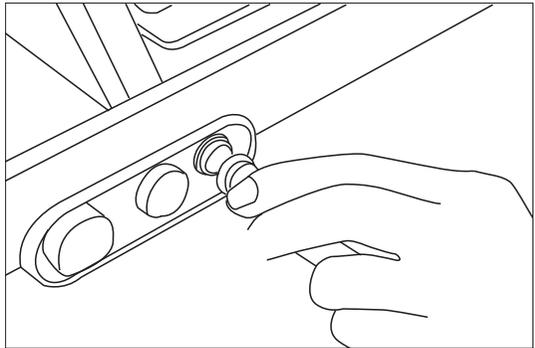


연결된 2P연결선을 본체 왼쪽 세 번째 커넥터에 연결합니다.


기본품

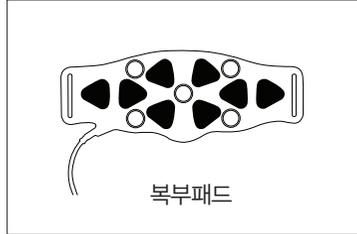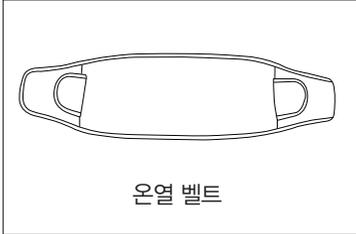


3. 온열벨트 & 복부패드 설치

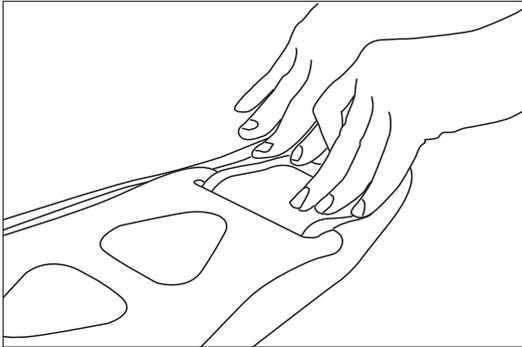


온열벨트와 복부패드를 결합합니다.

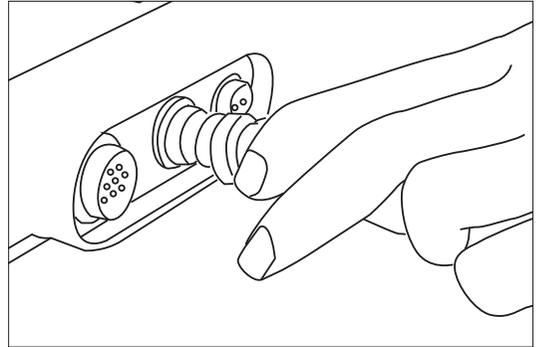

온열벨트는 본체의 왼쪽 두번째 커넥터에 연결합니다.

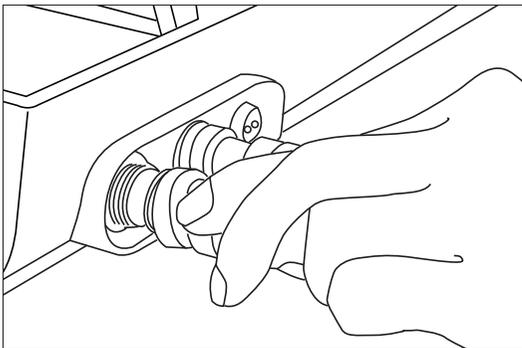


복부패드는 본체 왼쪽 첫 번째 커넥터에 연결합니다.

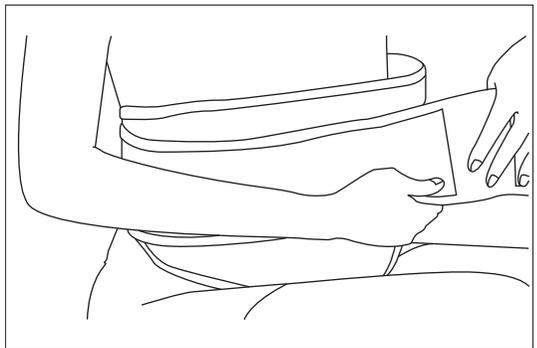

결합된 복부패드 & 온열벨트를 복부에 착용합니다.

II. 제품의 설치

기본품

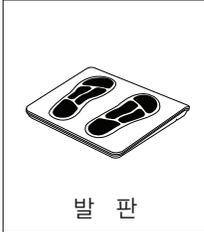

발판



발판 연결선

별매품




척추패드




케겔업

4. 발판 설치

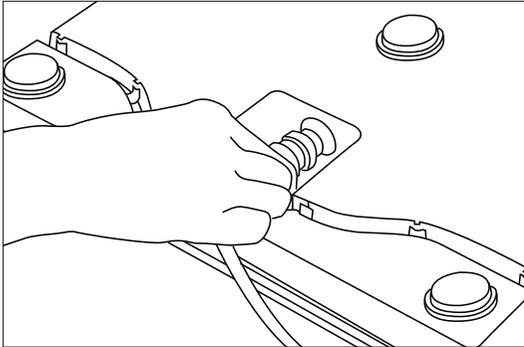


발판을 뒤집어서 발판 연결선과 결합합니다.

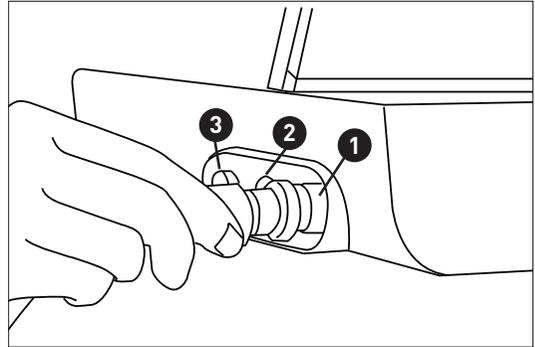


연결된 발판 연결선을 본체 오른쪽 첫번째 커넥터에 연결합니다.
(별매품 : 척추패드, 케겔업 동일하게 연결)

5. 전원 케이블 설치

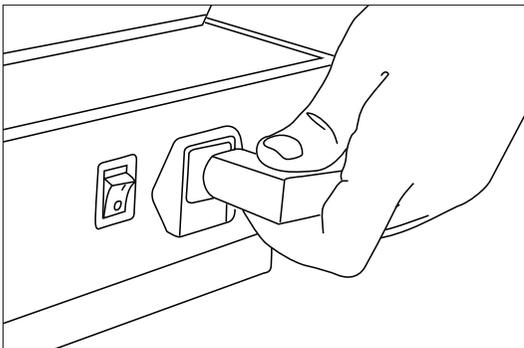

전원케이블을 본체 뒷면에 연결하고 전원스위치를 켭니다.

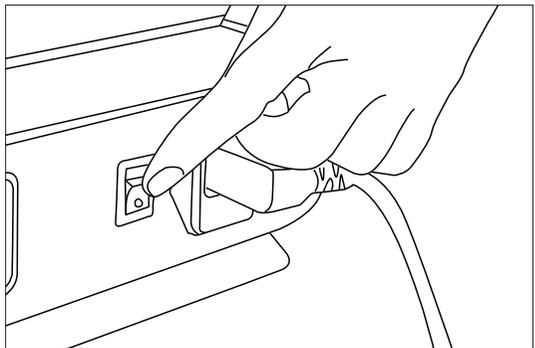

AinA-8000을 사용하기 위한 기본 준비가 완료됩니다.

6. 접지

1. 전기 누전이나 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지해 주십시오.

- 제품이상 발생 시 : 전기 누전이나 감전사고를 막기 위해 반드시 접지해 주십시오.
- 정상 제품에서도 접지를 하지 않을 경우 : 미세한 누설전류로 인해 인체에 전기를 느낄 수 있습니다. (반드시 접지 선이 있는 전원코드를 사용하도록 의무화 되었으며 접지를 반드시 해주어야 합니다.)

2. 콘센트에 접지 단자가 있는 경우


- 별도로 접지할 필요가 없습니다.
(단, 전원 콘센트에 접지가 되어 있지 않다면 접지를 해야 합니다.)
- 연장선 콘센트를 사용하는 경우 멀티 콘센트에 접지가 있어도 벽면에 메인 콘센트에 접지가 없다면 접지를 해야 합니다.

3. 콘센트에 접지 단자가 없는 경우

- 접지선이 없는 콘센트 또는 연장선 콘센트는 사용하지 마십시오.
(접지가 되지 않으므로 미세 누설전류가 발생할 수 있습니다.)

주의


- ※ 접지 콘센트를 사용하지 않을 경우 누설전류가 발생할 수 있습니다.
- ※ 전원스위치를 켜짐 상태로 전원코드를 연결하면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

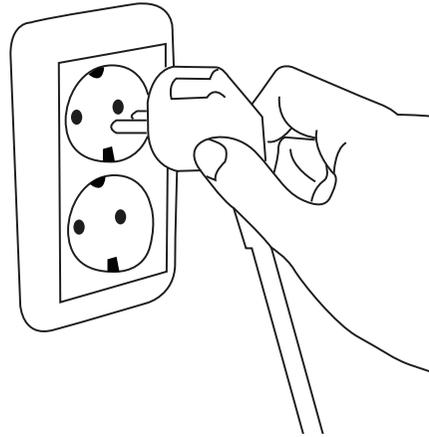

III. 사용방법


1. 저주파 사용방법

① 초기상태

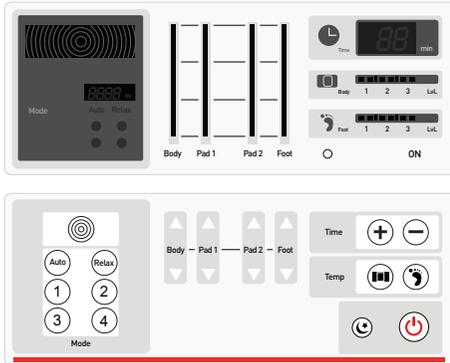


전원이 인가되기 전의 초기상태

② 전원 ON

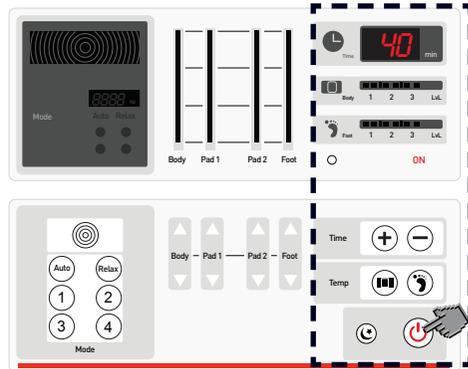


POWER 버튼을 눌러 전원을 켜다.

③ 시간 SETTING

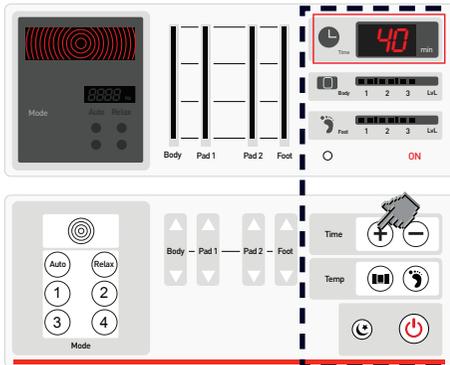


타임 +/-키로 시간을 설정한다.

④ BODY 강도조절

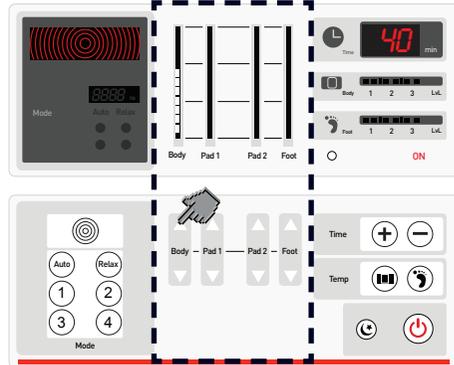


BODY 저주파 출력 강도를 조절한다.

⑤ PAD1 강도조절

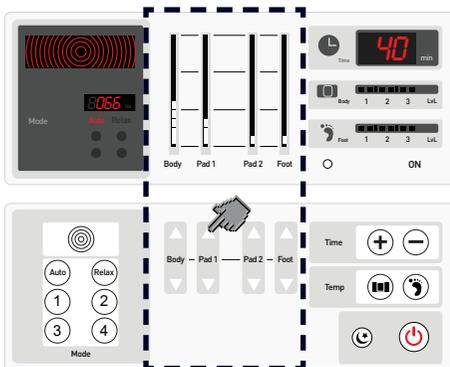


PAD1 저주파 출력 강도를 조절한다.

⑥ PAD2 강도조절

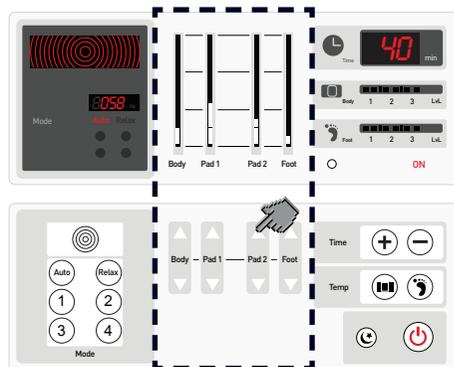


PAD2 저주파 출력 강도를 조절한다.

7 FOOT 강도조절

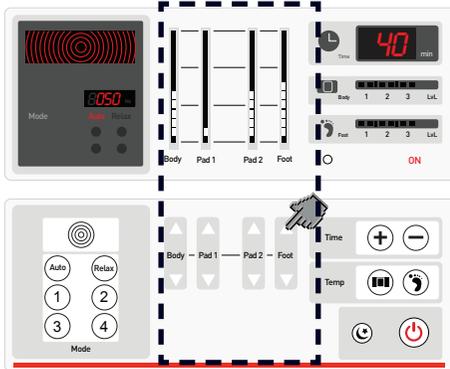


FOOT 저주파 출력 강도를 조절한다.

8 모드 변환

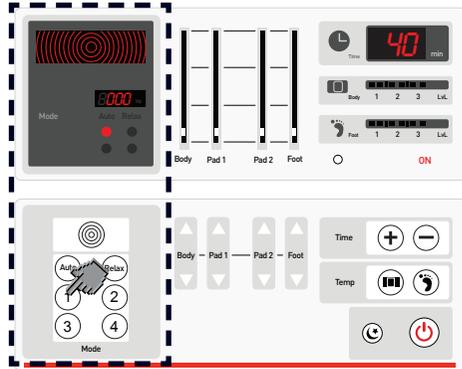


사용하고자하는 모드를 선택한다.
(모드 변환을 하면 각 출력의 강도는 초기상태로 변경된다.)

9 모드변환 후 강도조절

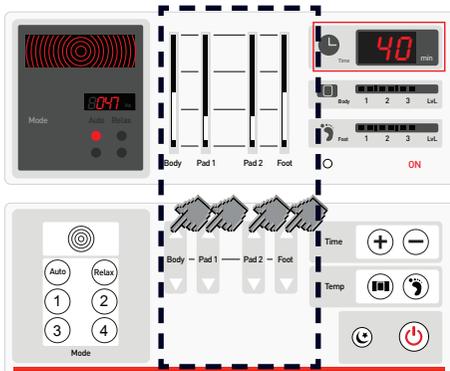


모드 변환을 하면 안전을 위한 장치로 출력의 강도가 초기상태가 되므로 출력구별 강도를 재설정한다

10 Dark mode

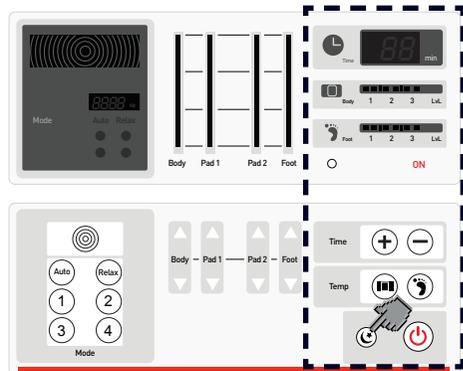

DARK 버튼을 누르면 DISPLAY 화면의 시간만 표시되며 다른 표시등은 꺼진다. (DISPLAY 화면 소등이 필요할 때 사용
※ 취침시, 눈이 부실 경우)


11 완료상태

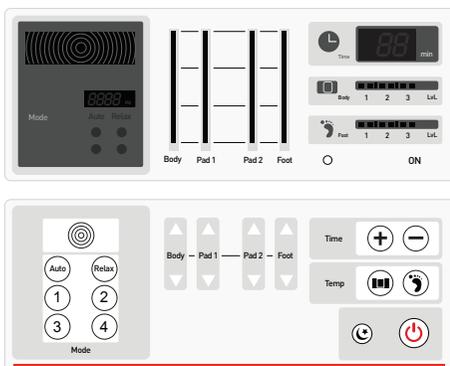

사용시간이 완료되면 출력이 정지되며 전원이 인가되기 전의 상태로 돌아간다.


2. 온열 사용방법

1 초기상태

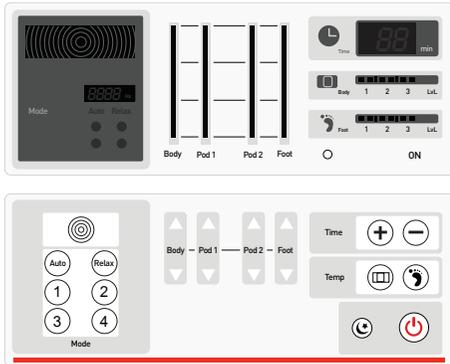


전원이 인가되기 전의 초기상태

2 전원 ON

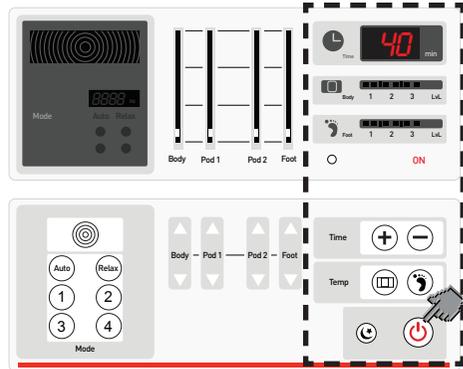


POWER 버튼을 눌러 전원을 켜다.

3 시간 SETTING

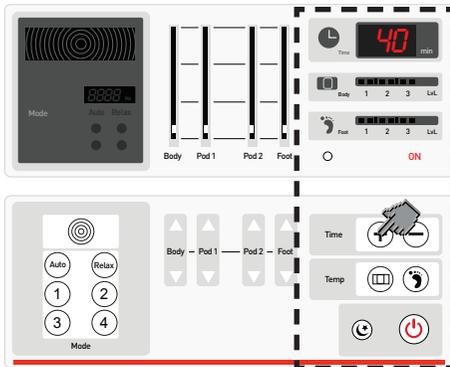


타임 +/-키로 시간을 설정한다.

4 온열 SETTING

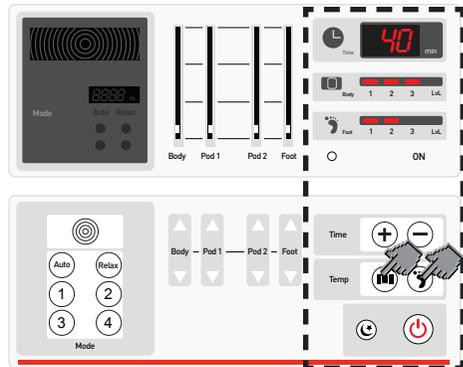

사용하고자 하는 부위(BODY/FOOT)의 온열을 설정한다.
버튼을 누를 때마다 온열의 강도가 High, Medium, Low, Off의 순서로 조절된다.


5 완료상태

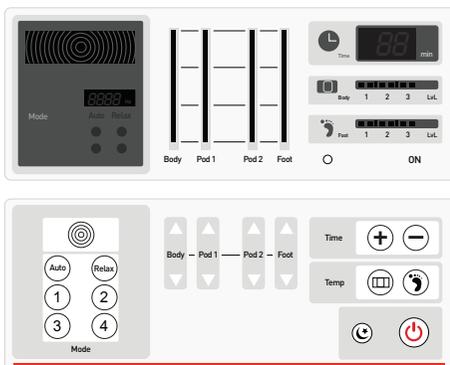

사용시간이 완료되면 출력이 정지되며 전원이 인가되기 전의 상태로 돌아간다.


3. LED 사용방법

1 초기상태

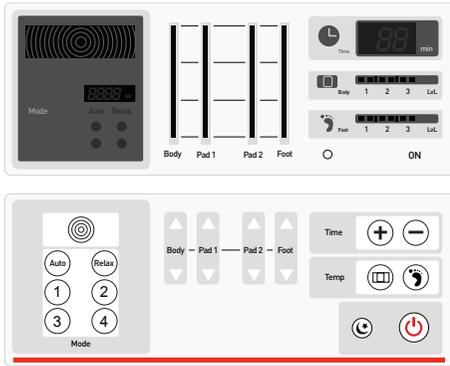


전원이 인가되기 전의 초기상태

2 전원 ON

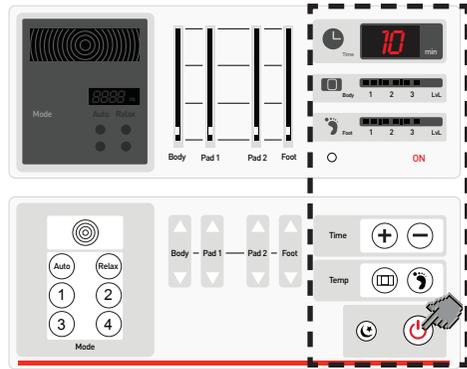


POWER 버튼을 눌러 전원을 켜다.

3 시간 SETTING

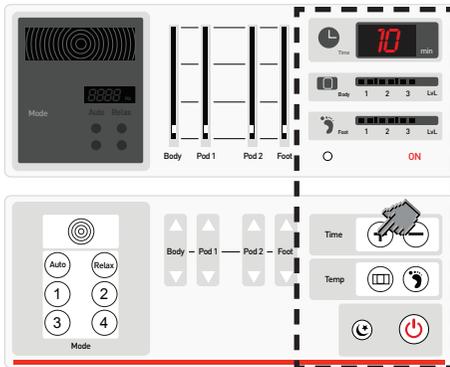


타임 +/-키로 시간을 설정한다.

4 LED LIGHT 동작

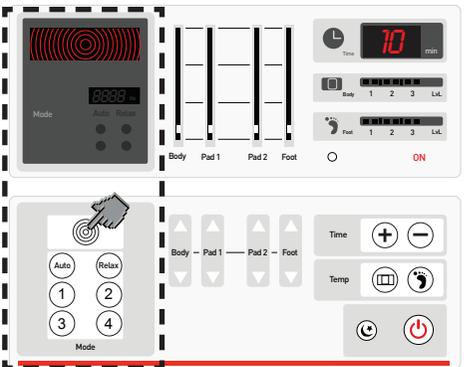

LED LIGHT 버튼 키로 LED를 동작시킨다.(3분사용/30초대기를 반복하며 동작되며 온열 및 저주파와 동시사용이 불가하다.)

5 완료상태

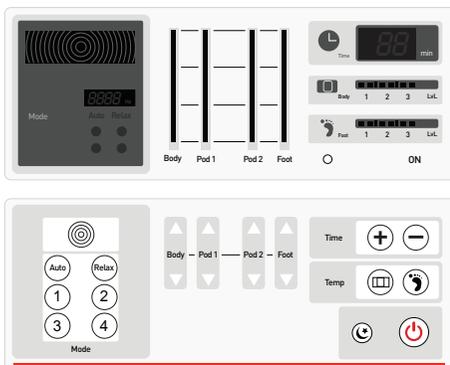

사용시간이 완료되면 출력이 정지되며 전원이 인가되기 전의 상태로 돌아간다.

IV. 관리 및 주의사항

1. 제품관리 및 보관방법

● 제품관리 방법

1. 청소를 하기 전에 반드시 전원 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 다음 청소하여 주십시오.
2. 보관, 청소 시에 제품에 강한 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장이나 제품 수명 단축의 원인이 되므로 주의하십시오.
3. 패드에 묻은 젤이나 먼지 등의 이물질은 부드러운 물수건으로 가볍게 닦아 주십시오.
4. 본체, 벨트 등에는 물기가 제품 내로 침투하지 않도록 마른 천으로 표면의 먼지를 가볍게 닦아 주십시오.
5. 제품상에는 알코올, 벤젠, 시너와 같은 용제를 사용하면 제품에 흡집이 나거나 손상될 수 있으니 사용하지 마십시오.
6. 제품손질 후에는 충분히 건조시켜 주십시오.
7. 복부패드는 복부 외 사용을 금하며, 심하게 굽히거나 충격을 줄 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.

● 보관 방법

1. 통풍이 잘 되는 상온의 실내에서 보관하십시오.
2. 사용 후에는 메인 전원스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑아 사용 전의 상태로 보관하십시오.
3. 직사광선을 피해 보관하십시오.
4. 급격한 온도 변화, 고온다습한 장소에 보관하지 마십시오.
5. 사용 후 패드, 벨트 등의 구성품을 제 위치에 잘 넣어 보관하십시오.
6. 각 코드나 케이블을 굽히거나 잡아당긴 채로 보관하지 마십시오.
7. 사용 후에는 제품 표면을 깨끗이 한 후 마른 상태로 보관하십시오.
8. 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
9. 복부패드는 펴서 보관 하십시오.

2. 제품 성능 및 사양

모 델 명	AinA-8000, AinA-8000L
제 품 명	개인용 조합자극기
정 격 전 압	AC 220V, 60Hz
소 비 전 력	125VA
제 품 치 수	364(W) x 270(L) x 60(H)mm
본 체 중 량	2.6kg
사 용 목 적	근육통 완화의 목적으로 저주파 자극 . 온열의 두가지 기능을 조합하여 사용하는 기구로 이를 사용할 때에는 의사의 처방 . 지도가 필요하다.
제 조 원	에인에이(주)
판 매 원	에인에이(주)
<p>※ 본 제품은 의료기기입니다.</p> <p>※ 품질 향상을 위해 디자인 및 제품 사양은 변경될 수 있습니다.</p> <p>※ 본 제품은 국내 판매용으로 제작된 제품입니다. 따라서 본 제품을 해외로 반출 시에는 어떠한 사후관리도 받을 수 없음을 양지하시기 바랍니다.</p>	

3. 제품의 A/S

제품에 이상이 있을 경우 A/S를 의뢰하기 전에 아래 사항을 다시 한번 확인하여 주십시오.

● 제품 A/S를 의뢰하기 전에

1. 전원 스위치를 눌러도 전원이 들어오지 않는다.
 - 전원 플러그의 접속상태를 확인하여 주십시오.
 - 메인 전원 스위치가 ON되어 있는지 확인하여 주십시오.
 - 전원플러그 접속구안에 있는 휴즈가 끊어지지 않았는지 확인하여 주십시오.
(휴즈가 끊어졌을 시에는 구비된 예비 휴즈로 교체)
2. 패드가 동작되지 않는다.
 - 전원스위치 → 전원버튼 → 강도 버튼(▲)이 차례대로 동작하였는지 상태를 확인하여 주십시오.
 - 사용하고자 하는 패드가 본체의 해당 커넥터에 정확히 체결되었는지 확인하여 주십시오.
3. 패드에서 이상한 소리가 난다.
 - 펄스에 의한 소음으로 고장이 아닙니다.
4. 사용 중에 따끔거린다.
 - 패드를 피부에 완전히 밀착하여 주십시오.
 - 패드의 전도성 실리콘에 이물질이 묻어 있는지 확인하여 수건이나 마른천으로 가볍게 닦아 주십시오.
 - 피부 및 패드를 깨끗이 닦아내고 매개체를 충분히 바르십시오.
 - 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
5. 제품 뒷면에 있는 전원 스위치를 비정상적으로(짧은 시간에) ON/OFF를 할 경우, 또는 비정상적인 종료(정전, 과부하 등)시 본체(회로)를 보호하고 사용자 안전을 위하여 5~10분 정도 전원이 차단될 수 있습니다.

※ 전기적 자극 느낌 : 본 제품은 전기 저주파를 이용하는 의료기기이므로 전기적 자극 느낌은 정상적인 동작입니다.

● 이상증상이 있을 때

1. 기타 기기의 고장을 발견하였을 경우 즉시 사용을 중지한 다음 메인 스위치를 끄고 전원플러그를 뽑아 주십시오. 그리고 고객센터로 이상증상을 설명 후 수리를 의뢰하십시오.
2. 서비스 의뢰는 구입처 및 본사 고객센터로 의뢰하십시오.
3. 본 제품의 정상적인 사용조건 상태에서 발생한 제품 이상에 대해서는 구입한 날로부터 1년간 무상으로 A/S 보증을 실시 합니다.

※ 소비자 부주의로 인한 고장은 유상으로 수리해 드립니다.



전국 소비자상담 전화
1566-9824

4. 품질보증서

상기 품목에 대하여 아래와 같이 품질을 보증합니다.

제 조 번 호							
보 증 기 간		년	월	일부터	년	월	일
구 입 처		지점명 :			TEL :		
고 객 기입란	성 명	고객님					
	주 소						
	전 화	TEL :			H.P :		

- 제품 구입 시 기재란을 필히 기재하여 주십시오.
- 구입한 지점의 보증서가 없는 제품은 서비스나 불이익 등의 책임을 지지 않습니다.

● 보증 규정

1. 보증기간

본 제품의 정상적인 상태에서 발생한 고장에 대해서는 구입일로부터 1년간 A/S센터에서 무상으로 수리하여 드립니다.

2. 보증수리 제외사항

- 고객의 취급부주의 및 조작의 잘못으로 인한 고장 또는 파손
- 당사의 지정 수리요원 외의 제3자의 수리 개조에 의한 고장 또는 파손
- 당사가 지정한 주변기기 및 소모품 이외의 제품과 사용하여 발생한 고장 또는 파손
- 보증서의 기재사항 미기재 및 무날인 또는 허위 기재시
- 사용 전원의 장애에 의한 고장 및 파손
- 정해진 사용 목적 이외의 다른 목적의 사용에 의해 발생한 고장이나 파손
- 천재지변에 의한 고장이나 파손

3. 보증기간외 수리


- 보증기간 외의 기간에 발생하는 고장에 대하여는 소정의 수리비를 받고 수리를 해드립니다.
- 본 보증규정 이외의 사항에 대하여는 소비자 보호법에 의거한 소비자 피해보상 규정에 의해 처리됩니다.
- 기타 고장이나 문의사항이 있을 시에는 구입한 판매점이나 본사 고객상담실로 연락을 주시기 바랍니다.
- 사용하시기 전에 반드시 사용설명서를 숙지하여 주시기 바랍니다.

4. 주의사항


- 본 품질보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 본 품질보증서는 재발행하지 않으므로 분실하지 않으시길 바랍니다.
- 본 품질보증서를 A/S 문의시 꼭 제시 하십시오.
- A/S 문의시 불편한 사항이 있으시면 구입한 판매점이나 본사 고객상담실로 연락을 주시기 바랍니다.

부록) 본체+거치대 조립 방법

※ 조립도

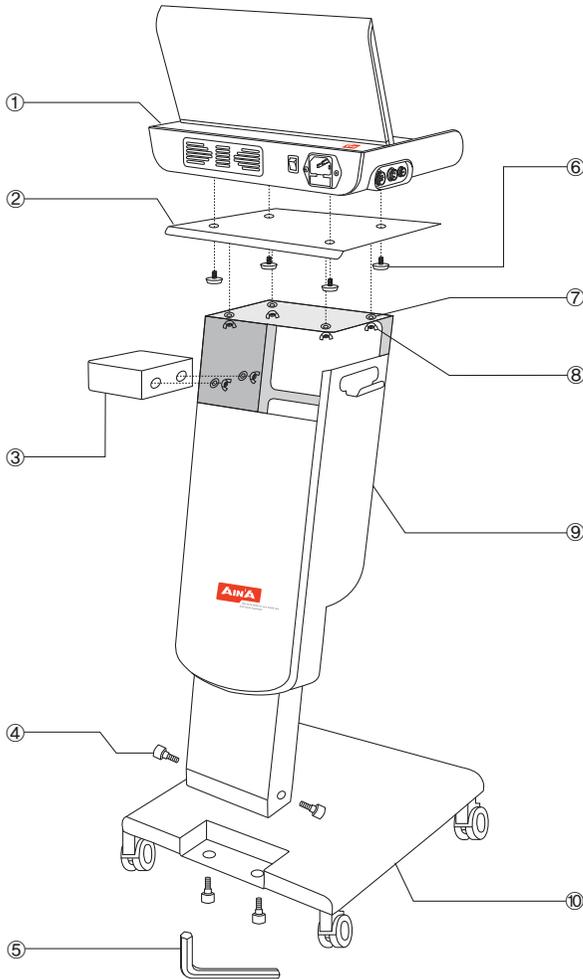

※ 완성도

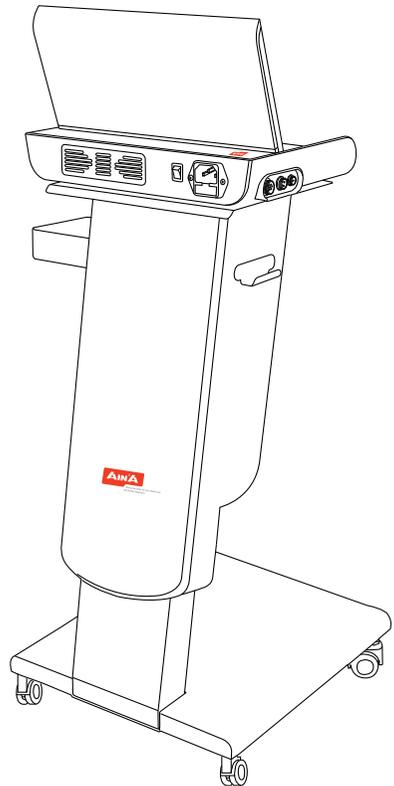

- | | |
|----------------------|------------------------|
| ① 본체 (Desktop) | ⑥ 너트 (Nut) |
| ② 탑 플레이트 (Top plate) | ⑦ 워셔 (Washer) |
| ③ 바스켓 (Basket) | ⑧ 나비너트 (Flynut) |
| ④ 육각볼트 (Hex bolt) | ⑨ 프레임 베이스 (Frame Base) |
| ⑤ 육각렌치 (Hex wrench) | ⑩ 프레임 풋 (Frame Foot) |

AinA-8000 사용설명서

Personal Combinational Stimulator

본사 : 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 407-1

Tel : 053-324-9824 / Fax : 053-314-5982

연구소&생산라인 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천로 1길 119

Tel : 053-583-0602 / Fax : 053-582-5982



Aina to be better for your health care
And human happiness